


DUOSWIFT REINIGUNGS- UND LAMELLENBÜRSTE

Unsere DuoSwift Reinigungs- und Lamellenbürste erleichtert die Aufbereitung von flexiblen Endoskopen auf intelligente Art und Weise.

DuoSwift wurde für die Reinigung von Endoskopen mit einem

Kanaldurchmesser von 2,8 mm bis 7,0 mm entwickelt. Das einzigartige Design verfügt über eine konische Bürste mit Nylonborsten an einem Ende sowie eine Reihe flexibler Lamellen am anderen Ende. Diese Bürste erleichtert die Aufbereitung, denn dank der Kombination aus Borsten und Lamellen werden mehr

Verunreinigungen pro Durchgang entfernt.¹ Darüber hinaus benötigen Sie aufgrund der breiten Kompatibilität von DuoSwift mit den gängigsten Kanaldurchmessern nur noch eine einzige Bürste im Bestand.

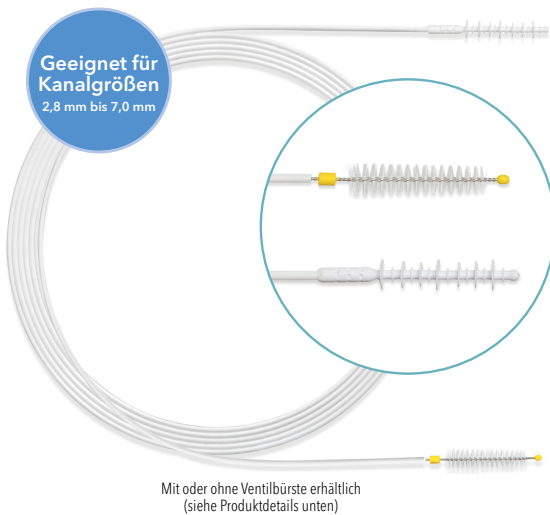

DESIGN:

- Dank der Nylonborsten und der größeren Borstenoberfläche (Borstenlänge von 2,5 cm) werden Verunreinigungen durch Reibung gelöst und entfernt
- Die abgerundete Spitze schützt vor einer unbeabsichtigten Beschädigung des Kanals gemäß den Angaben der Endoskophersteller
- Ein Stopper verhindert, dass die Bürste in Endoskopkanäle mit geringerem Durchmesser als 2,8 mm eindringt

ERGEBNIS:

- Deutlich effizientere Reinigung im Vergleich zum Konkurrenzprodukt¹
- Verringerung eventueller kostspieliger Reparaturen im Zusammenhang mit Schäden im Kanal
- Standardisierung des Bestands an Reinigungsbürsten aufgrund der breiten Kompatibilität

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	BÜRSTEN-DURCHMESSER (MM)	KOMPATIBLER DURCHMESSER (MM)	LAMELLEN-DURCHMESSER (MM)	MANTEL-DURCHMESSER (MM)	VENTILSTEUER-KOPFBÜRSTE (MM)	GESAMT-LÄNGE	MENGE
BX00711618	DuoSwift Reinigungs- und Lamellenbürste	5-7 (konisch)	2,8-7,0	2,5-5,2	1,7	n. z.	230	50/ Karton
BX00711619	DuoSwift Reinigungs- und Lamellenbürste mit Reinigungsbürste für den Ventilsteuerkopf	5-7 (konisch)	2,8-7,0	2,5-5,2	1,7	10	230	50/ Karton

FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE STERIS.COM ODER WENDEN SIE SICH AN IHREN STERIS-VERTRETER

¹ Prüfbericht: Archivdaten von STERIS.

©2024 STERIS. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Firmen- und Produktnamen sind Marken von STERIS, seinen Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

M12818DE

 **STERIS**

STERIS Deutschland GmbH
Eupener Straße 70
50933 Köln
Tel.: 0221 / 466120-90
Fax: 0221 / 466120-40
E-Mail: KundenServiceEndo@steris.com
www.steris.com